

간호사 화면

로그인



간호사



약사

사번

2

이름

박지훈

로그인

컴퓨터 1에 'Licar_wpf_prod.exe' 를 실행한다.

간호사를 선택하고

사번:2

이름:박지훈

을 입력하고 로그인한다.

약사 화면

로그인

☐ 간호사

☒ 약사

사번

1

이름

이준선

로그인

컴퓨터 2에 'Licar_wpf_prod.exe' 를 실행한다.

약사를 선택하고

사번:1

이름:이준선

을 입력하고 로그인한다.

간호사 화면

[간호사] 박지훈로그아웃

환자 검색

검색

환자 번호	환자 이름	병동 호실
1	유준호	301
2	유준	301
3	김부각	302

환자 상세 정보

환자 번호: 1

이름: 유준호

②년월일: 2010-02-20

입원일: 2025-09-16

퇴원일:

병동 호실: 301

담당 간호사: 정하균

약 운반 요청

처방전 목록

처방전 번호	처방일
4	2025-09-19

처방전 상세 정보

투약 기간 14 일 (2025-09-19 ~ 2025-10-02)

복약지도

1일 3회 아침, 점심, 저녁 복용

약 목록

이름	용량	단위
씨엘지씨파클리캡슐	1	캡슐
러키펜정	1	정
에드로캡슐	300	mg
휴티렌정	1	정

① 환자 검색에서 아무 것도 입력하지 않고 검색을 누르면 모든 환자에 대한 정보가 나타난다.

② 환자 목록에서 운반 요청을 보낼 환자를 클릭한다.

③ 운반 요청을 보낼 처방전을 클릭하면 ④ 의사가 처방한 약의 목록이 나타난다.

⑤ 약 운반 요청을 클릭하여 약에 대한 정보를 약사로 보낸다.

약사화면

[약사] 이준선로그아웃

②

약 운반 요청 목록

요청 번호	상태	간호사
1	completed	정하균
2	in_transit	김성재
3	requested	박지훈
4	requested	정하균

운반 상세 정보

요청 시간 : 2025-09-07 16:05
운반 시작 :
도착 시작 :
현재 상태 : 요청
로봇 번호 : 1
담당 간호사 : 정하균

③

처방전 목록

처방전 번호	환자 이름	처방 날짜
4	유준호	2025-09-19

처방전 상세 정보

투약 기간 : 14 일
환자 이름 : 유준호
복약 지도 : 1일 3회 아침, 점심, 저녁 복약

④

약 목록

약 이름	용량	단위
씨엠지씨파클리캡슐	1	캡슐
라키펜정	1	정
에드로캡슐	300	mg
휴티렌정	1	정

①

약 요청이 들어왔습니다!!!!

① 약 운반 요청이 들어오면, ② 운반 요청 목록이 갱신되며 약 운반 요청 내용을 확인할 수 있다.

③ 처방전 목록에서 가장 최근 처방전 목록을 선택하면

④ 약의 목록이 나타난다.

HW



① 약사의 명함을 준비한다.



② LiCar 에 부착된 NFC Reader 기에 약사의 명함을 TAG한다.



③ 정상적으로 TAG 될 시, WEB캠의 LED에 파란불이 들어온다.



④ 제조된 약을 카메라에 인식한다.

약 목록

약 이름	용량	단위
씨엠지씨파클러캡슐	1	캡슐
러키펜정	1	정
에드로캡슐	300	mg
휴티렌정	1	정

⑤ 약이 인식 될 때 마다 약사의 화면에 인식 된 약의 색이 초록색으로 바뀐다.



⑥ 간호사가 요청한 모든 약이 인식 되면 LiCar 상자에 문이 열린다.



⑦ 약을 넣는다.



⑧ 다시 NFC TAGGING하면, LiCar 상자의 문이 닫히며, Gazebo SIM이 실행된다.




SIM

의국




의국에서 출발한 LiCar는 자율 주행을 통해 주행 중 나타나는 방해물을 감지하고 회피하며 환자의 호실로 약을 배달한다.

주행 방해물

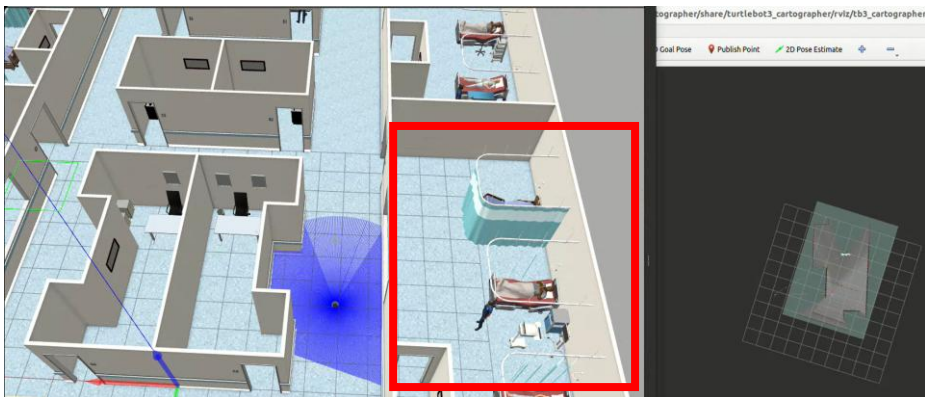

약을 전달할 환자 호실

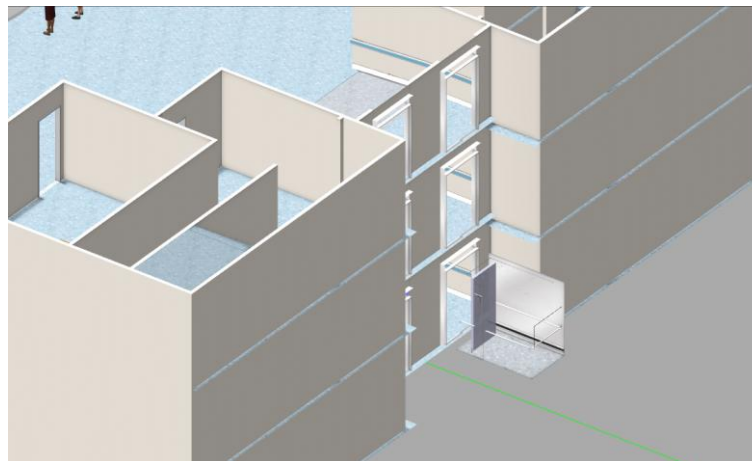

더불어 환자의 호실이 윗층에 있는 경우, 엘리베이터와 상호 작용하여 엘리베이터의 방향과 상태에 따라 엘리베이터를 호출하여 자율주행한다.



약이 운반 중일 경우에는
NFC Tagging해도 LiCar의
상자는 열리지 않는다.



운반이 완료 된 경우, 간호사
의 명함을 Tagging하면
LiCar의 상자가 열린다.